Lifetime Limited Warranty

If you have a question about your MOBB Healthcare device or this warranty, please contact an authorized MOBB Healthcare dealer.

MOBB Healthcare warrants to the original consumer purchaser for as long as they own their MOBB product that it will be free from defects in material and workmanship under normal use. This warranty is only applicable to products used in residential applications within the United States and Canada and is not transferable to subsequent owners. Should defects in material or workmanship exist during the applicable warranty period in any MOBB Healthcare Product, MOBB Healthcare will elect at its discretion to either repair or replace the defective material. This warranty covers only parts and materials of the products supplied by MOBB Healthcare. Not covered under this warranty are wear and tear items or abuse of the product in a manner that was not intended for the product to be used. This warranty shall become void if the product is in any way modified, improperly adjusted or abused.

MHADJRTS

990000001315

MOBB HEALTH CARE

4” Adjustable Raised Toilet Seat



MOBB Healthcare Ltd.

116A Viceroy Rd. Unit 5-6
Concord, Ontario, Canada
L4K 2M1
www.mobbhhc.com

Learn about the parts





Assembly Instructions

STEP 1. Remove the item from the box. If the 4" Adjustable Raised Toilet Seat has been exposed to cold, allow it to reach room temperature before assembly. This will help prevent potential cracking during the assembly process.

STEP 2. Lift up the toilet seat and lid.

STEP 3. Place the adjustable toilet seat onto the toilet seat frame, as shown in Figure 2 below.

Assembly Instructions



FIGURE 2

STEP 4.

a. Gently squeeze the sides of the adjustable seat to clear the rim of the toilet seat frame.

Avoid over-squeezing to prevent damaging the seat.

FIGURE 3



Assembly Instructions

STEP 4.
b. Ensure the flange is positioned inside the rim of the toilet seat.
c. Release your grip. The flange will press against the inside of the rim, securing the seat in place.

STEP 5. Confirm that the adjustable seat is securely in place on the toilet seat frame.

CARE & CLEANING

- Regular Cleaning is recommended.
- Use a non-abrasive cleaner or detergent. Rinse with warm water and dry with completely.
- Regularly inspect your adjustable toilet seat for any corrosion, breakage, compression or wear.

SCAN & CHECK INSTALLATION VIDEO

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour toute question relative à cet appareil de MOBB Healthcare ou à sa garantie, veuillez communiquer avec un dépositaire autorisé de MOBB Healthcare.

MOBB Health Care garantit à l'acheteur-consommateur initial que ce produit sera libre de tout vice de matériau ou de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation aussi longtemps qu'il en sera propriétaire. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits utilisés à la maison au Canada et aux ÉtatsUnis et n'est pas transférable aux propriétaires subséquents. Si tout vice de matériau ou de main-d'œuvre survenait durant la période de garantie, MOBB Healthcare pourrait, à son unique discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux. Cette garantie ne couvre que les pièces et les matériaux fournis par MOBB Healthcare. Cette garantie ne couvre pas toute défaillance de l'appareil attribuable au mauvais usage ou à la négligence de son propriétaire, ni à l'usure normale. Cette garantie deviendra nulle si le siège est d'aucune manière modifié, mal ajusté ou mal utilisé.

MHADJRTS

990000001315


4" Siège De Toilette Surélevé Ajustable



MOBB Healthcare Ltd.

116A Viceroy Rd. Unit 5-6
Concord, Ontario, Canada
L4K 2M1
www.mobbhhc.com

En savoir plus sur les pièces

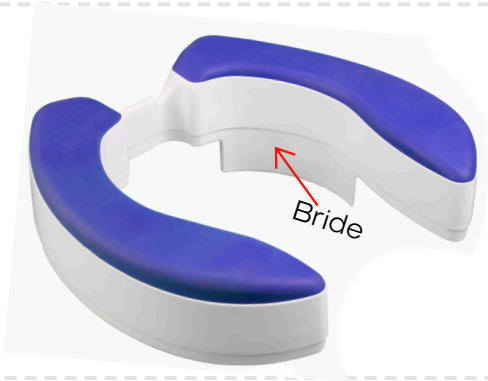



Instructions D'assemblage

Étape 1. Retirez l'article de la boîte. Si le siège de toilette surélevé ajustable de 4 pouces a été exposé au froid, laissez-le atteindre la température ambiante avant l'assemblage. Cela aidera à éviter toute fissuration potentielle pendant le processus d'assemblage.

Étape 2. Soulevez le siège et le couvercle de la toilette.

Étape 3. Placez le siège de toilette ajustable sur le cadre du siège de toilette, comme montré dans la Figure 2 ci-dessous.

Instructions D'assemblage



Étape 4.

a. Pressez doucement les côtés du siège ajustable pour dégager le bord du cadre du siège de toilette.

Évitez de trop presser pour ne pas endommager le siège.



Instructions D'assemblage

Étape 4.

b. Assurez-vous que la bride est positionnée à l'intérieur du bord du siège de toilette.

c. Relâchez votre prise. La bride appuiera contre l'intérieur du bord, fixant ainsi le siège en place.

Étape 5. Vérifiez que le siège ajustable est bien fixé sur le cadre du siège de toilette.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

- Un nettoyage régulier est recommandé.
- Utilisez un nettoyant ou détergent non abrasif. Rincez à l'eau tiède et séchez complètement.
- Inspectez régulièrement votre siège de toilette ajustable pour détecter toute corrosion, rupture, compression ou usure.

SCAN & VÉRIFIER LA VIDÉO D'INSTALLATION